

 ZENIT

Цикл

МИНИ-
МИКРОСКОП



MINI-
MICROSCOPE



Цусле



Мини-микроскоп “Цикл”

для ранней диагностики беременности

С помощью мини-микроскопа

Вы можете:

- Избежать нежелательной беременности;
- Определить наиболее благоприятное время для планирования семьи;
- Определить наличие беременности.

Индивидуальная экспресс-диагностика с помощью мини-микроскопа позволяет быстро без вмешательства в организм и проведения каких-либо специальных анализов определить благоприятные и неблагоприятные для зачатия дни в женском менструальном цикле, а также определить наличие беременности.

Minimicroscope “Cycle”

for early diagnostics of pregnancy

By means of “Cycle” minimicroscope

one has the following possibilities:

- a woman may avoid the undesired pregnancy;
- it's possible to define the most favourable time for planning posterity;
- to define that a woman is pregnant.

Individual express-diagnostics by means of “Cycle” minimicroscope allows to quickly define favourable and unfavourable days for conception during a woman’s menstrual cycle without intervention into a human body and performing some kind of medical tests.

Принцип действия прибора

Принцип действия прибора основан на изменении физических свойств слюны в зависимости от содержания в ней эстрогенов и солей, что напрямую связано с наличием половых гормонов в организме женщины.

Порядок работы

Каплю слюны нанести на предметное стекло микроскопа. После высыхания слюны включить подсветку и рассмотреть изображение пробы, сравнивая его с графическим рисунком-эталоном. Отсутствие "папоротниковой" структуры на рассматриваемом образце пробы слюны в обычные для ее появления дни свидетельствует о наличии беременности.

The operation principle of this device is based on the change of physical properties of the saliva depending on the availability of estrogens and salts in it. Such a change is directly connected with the presence of sexual hormones in a female organism.


Operation order:

Apply a drop of the saliva on an object glass of a microscope. Let the sample of the saliva dry.

Then switch on an illuminator.

View the resulted image comparing it with a graphical picture – a primary standard.

The absence of "fern" picture on the viewed image of the saliva drop in days usual for its appearance testify a woman is pregnant.

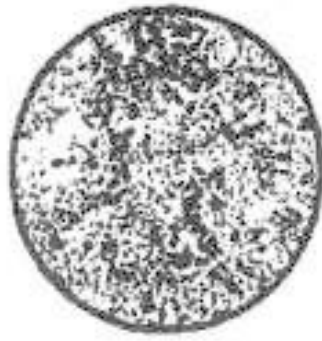

Неблагоприятный для зачатия период
Unfavourable days for conception



Переходный период
"Transition" days



Благоприятный для зачатия период
Favourable days for conception

*Прибор может использоваться
врачами как средство контроля
для определения терапевтического
воздействия лекарственных
препаратов.*

Технические характеристики

Увеличение лупы	51 крат
Время проведения экспресс-анализа	10 - 15 мин.
Питание	2 элемента МЦО-105 или аналоги 386А, G-12 и т.д.
Освещение	светодиод АЛ336И

*Одобрено Минздравом
Российской Федерации.*

Specifications

Magnification of a magnifier	51 ^x
Period of time of an express-analysis	10 - 15 min
Power supply	2 elements of 386A, G12 type
Illumination	LED of АЛ336И

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД им.С.А.ЗВЕРЕВА"**

*ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ*

ТЕЛ.: (095) 561-8083
ТЕЛ./ФАКС: (095) 564-5552

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА "ЗЕНИТ"

ТЕЛ./ФАКС: (095) 562-2327

ОТДЕЛ СБЫТА

ТЕЛ.: (095) 561-8084
ТЕЛ./ФАКС: (095) 563-4265

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

ТЕЛ.: (095) 561-8926
ТЕЛ./ФАКС: (095) 562-8316

*АДРЕС: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
143400, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
г.КРАСНОГОРСК, ул.РЕЧНАЯ,8*

**"KRASNOGORSKY ZAVOD"
JOINT STOCK COMPANY**

*ASSISTANT GENERAL DIRECTOR
OF MARKETING AND SALES*

TEL: (095) 561-8083
TEL/FAX: (095) 564-5552

FOREIGN TRADE FIRM "ZENIT"

TEL/FAX: (095) 562-2327

SALES DEPARTMENT

TEL: (095) 561-8084
TEL/FAX: (095) 563-4265

MARKETING DEPARTMENT

TEL: (095) 561-8926
TEL/FAX: (095) 562-8316

*ADDRESS: 8, RECHNAYA St.,
KRASNOGORSK, MOSCOW Reg.,
143400 RUSSIAN FEDERATION*